



Ekinograph T6

Анализатор поврежденного крахмала ЕКИНОГРАФ **(ЭКИНОГРАФ) Т6**

Описание: предназначен для определения количества поврежденного крахмала в муке.

Результат полностью соответствует

ГОСТ. ISO 17715-2015 МУКА ИЗ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Амперометрический метод
определения поврежденного
крахмала.

Для проведения теста используется
всего 1 грамм муки. Время теста
составляет от 6 минут до 8 минут.
Прибор выполняет измерения с
помощью метода ионного
связывания крахмала.



Принцип анализа: прибор измеряет степень поглощения молекул йодида калия молекулами повреждённого крахмала в специальном растворе. Чем больше молекул будет поглощено, тем больше повреждённого крахмала в данной муке.

Преимущества:

- Точный анализ всего 6-8 минут.
- Малый образец для получения точного результата – 1 г.
- Данные прибора могут быть немедленно использованы для перенастройки валков на мельнице.
- Данные прибора могут дать четкую картину о качестве будущей выпечки.
- Прибор может быть подключен к внутренней сети предприятия.
- Русифицирован

ПРОИЗВОДСТВО: EKIN LTD (Турция)

ДИСТРИБЬЮТЕР в России: ООО АГРОЛА

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 11

Тел.: 8-800-550-32-16 (федеральный). Тел.: +7-495-507-10-15 (многоканальный)

Whatsapp, Viber, Telegram: +7 (925) 507-10-15

E-mail: info@agrolla.ru, Сайт: <http://www.agrolla.ru>






Лабораторная мельница для качественного помола и сортировки по фракциям EKIINOGRAPH (ЭКИНОГРАФ) D6

Предназначена для качественного измельчения зерновых культур, для последующего их анализа, определения выхода продукта.

Особенности: используется для определения качества пшеницы, ржи дальнейшего производства различных смесей из муки, чтобы получить оптимальный продукт (смесь из муки) с высокой эффективностью.

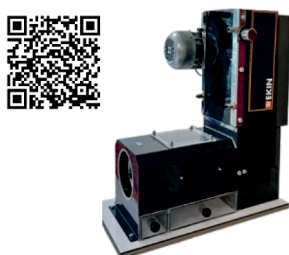

Лабораторная мельница валкового типа для пробных помолов EKIINOGRAPH LD6.

Используется для подготовки проб пшеницы при проведении дальнейших анализов: анализа клейковины, числа падения, седиментации и пр.

Особенности: валцы мельницы изготовлены из высококачественной закалённой износостойчивой стали. Замена валцов по причине износа валцов в нормальном режиме эксплуатации не требуется



Экстенсограф эластичных свойств теста EKIINOGRAPH (ЭКИНОГРАФ) E6

Определяет физические свойства теста. Он измеряет эластичность теста и его сопротивление растяжению.

Особенности: позволяет получать необходимые данные о хлебопекарных свойствах муки, а также о реологических свойствах в процессе замеса теста



Амилограф активности альфа-амилазы в муке EKIINOGRAPH (ЭКИНОГРАФ) A6.

Дает возможность определить подходящий фермент альфа-амилазы для данной пшеничной муки и продуктов грубого помола, оптимизировать дозирование этого фермента.

Особенности: контроль качества муки. Какой лучше улучшитель применить для получения желаемого качества хлеба для определенного вида муки



Анализатор водопоглотительной способности муки фаринограф EKIINOGRAPH (ЭКИНОГРАФ) F6.

Служит для определения широкого спектра данных о замешивающих и хлебопекарных свойствах муки, в том числе дает информацию о степени поглощения воды мукой. Информация анализа, дает представление о влиянии теста на тестомесильную машину.

Особенности: прибор оснащен встроенным компьютером с программным обеспечением. Управление компьютером осуществляется с помощью сенсорного экрана прибора

ПРОИЗВОДСТВО: EKIN LTD (Турция)



ДИСТРИБЬЮТЕР в России: ООО АГРОЛА

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 11

Тел.: 8-800-550-32-16 (федеральный). Тел.: +7-495-507-10-15 (многоканальный)

Whatsapp, Viber, Telegram: +7 (925) 507-10-15

E-mail: info@agrolla.ru, Сайт: <http://www.agrolla.ru>